

OMIO – 450

Портативный ирригатор для
полости рта
Инструкция по применению

Благодарим вас за то, что выбрали наш
портативный ирригатор для полости рта.
Ваши зубы будут здоровыми, а улыбка – яркой.

Оглавление.....	01
Меры предосторожности.....	02
Описание прибора.....	06
Принадлежности.....	07
Правила эксплуатации.....	08
Инструкция по применению.....	09
Рекомендуемые техники.....	10
Пример разборки на детали.....	11
Техническое обслуживание и обращение с батареей.....	12
Распространенные проблемы.....	13
Гарантийное обслуживание.....	14

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо всегда соблюдать базовые меры предосторожности, описанные ниже

ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ОПАСНОСТИ:

Для минимизации риска поражения электрическим током:

- Не берите зарядное устройство мокрыми руками.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор, когда принимаете ванну или душ.
- Не ставьте и не храните прибор в месте, откуда он может упасть в ванну, душ или раковину.
- Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду. Немедленно отключите от электросети.
- Проверьте, не поврежден ли шнур прибора перед первым использованием, и периодически проверяйте шнур на наличие повреждений при последующем использовании прибора.

ОСТОРОЖНО:

Для минимизации рисков ожогов, поражения электрическим током, возгорания, травмирования тканей:


- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными возможностями или недостаточным опытом и знаниями, но при условии, что они используют прибор под присмотром или проинструктированы относительно его безопасного использования и знают о существующих рисках.
- Ирригаторы для полости рта необходимо использовать только с холодной или теплой водой, а также со специальными растворами в соответствии с инструкцией по применению.
- Дети не должны играть с ирригатором. Прибор необходимо подключать только к сети с безопасным сверхнизким напряжением, совпадающим по значению с напряжением, указанным на маркировке прибора.
- Батарею прибора нельзя заменить.
- Не подключайте прибор к электросети с напряжением, которое отличается от напряжения, указанного на маркировке прибора или зарядного устройства.
- Если прибор вскрыт/разобран на детали по ЛЮБЫМ причинам, гарантия НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА.
- Не пользуйтесь прибором, если повреждены вилка или шнур, если прибор работает неправильно, если его роняли или повредили, если он упал в воду. Обратитесь к местному дистрибьютеру.
- Не направляйте водяную струю под язык, в ухо, нос или другие чувствительные зоны. Водяная струя под высоким давлением может их повредить.
- Не направляйте водяную струю в нос или ухо. Иногда в водопроводной воде или хлорированной воде из подземного источника встречается потенциально смертоносная амеба неглерия Фоулера, которая при прямом попадании в эти зоны может привести к смертельному исходу.


Меры предосторожности

- Используйте прибор только в рамках предусмотренного применения, описанного в данной инструкции, или в соответствии с рекомендациями вашего стоматолога.
- Магнитное поле: магнит может повлиять на кардиостимуляторы и другие имплантируемые медицинские изделия.
- Не пытайтесь вставить посторонние предметы в открытые разъемы прибора.
- Держите зарядное устройство и шнур вдалеке от нагреваемых поверхностей.
- Не используйте этот продукт на улице или в помещениях, где распыляются аэрозоли (спреи) или куда поступает дополнительный кислород.
- Тщательно инструктируйте детей и лиц с особенностями развития и присматривайте за ними, чтобы обеспечить надлежащее использование прибора.
- Присматривайте за детьми, использующими прибор, так как они могут с ним играть.


СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Описание прибора

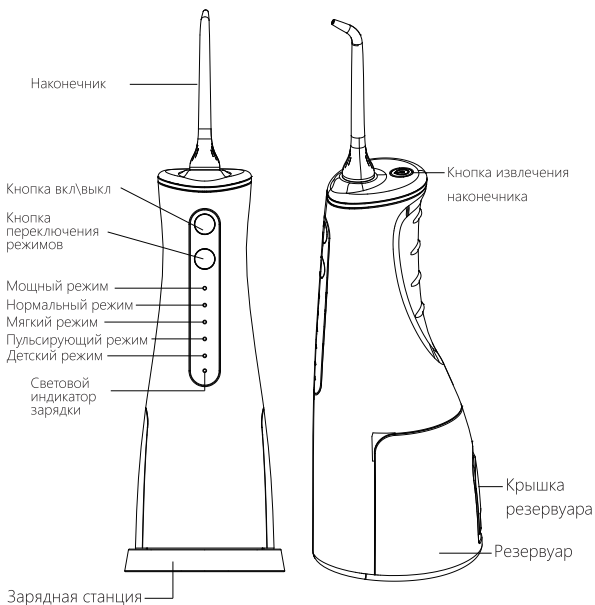


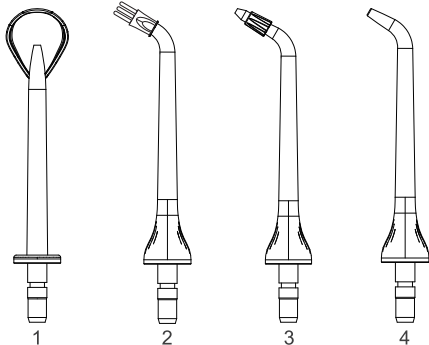

- 1: Наконечник для чистки языка *1
- 2: Ортопедический наконечник *1
- 3: Ортодонтический наконечник *1
- 4: Стандартный наконечник *2

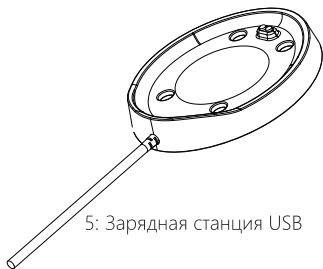

5: Зарядная станция USB

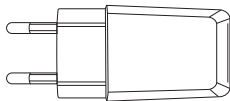

6: Адаптер

1. Подготовка к началу работы

Очень важно! При первом использовании поставьте прибор на индукционную зарядную станцию, затем подключите шнур к сети.



2. Установка наконечника

Установите наконечник в отверстие на верху ирригатора до щелчка.



3. Заполнение резервуара водой


Внимание: перед заполнением резервуара водой убедитесь, что прибор отключен от электросети



4. Выбор режима


Перед началом работы с ирригатором вы можете выбрать подходящий режим.

ВАЖНО! Начинайте использование ирригатора с минимального режима, постепенно увеличивая мощность!

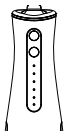


5. Включение ирригатора

Поместите наконечник в рот и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

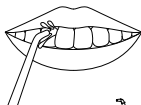

6. Замена наконечника

Чтобы снять наконечник, нажмите на кнопку извлечения наконечника, затем потяните за наконечник.

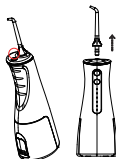

О приборе


- При первом использовании прибор работает в режим «Мягкий», установленном по умолчанию.
- У прибора есть функция памяти, после выключения он сохранит последний выбранный режим.
- Вы можете выбрать нужный режим перед включением прибора.
- Прибор автоматически отключится после 2 минут работы.
- Для удобства в приборе есть функция постепенного запуска давления. Это значит, что через секунду после запуска ирригатора его давление станет максимальным для выбранного режима.
- Наконечник прибора может быть повернут вручную на 360°, чтобы водяная струя под давлением достигла всех участков, для которых рекомендован «мягкий» режим.
- При первом использовании рекомендуется чистить десны в «мягком» режиме.

О зарядке:


- Перед первым использованием полностью зарядите прибор. Прибором НЕЛЬЗЯ пользоваться во время его зарядки.
- Расход батареи для каждого режима по возрастанию: 20% - 40% - 60% - 80% - 100%.
- При зарядке прибора все шесть световых индикаторов загорятся одновременно на 0,1 секунду, как только прибор подключится к сети. Например: если горит красный индикатор нормального режима, то батарея заряжена на 60% или статус зарядки равен 60-80%.
- Когда прибор полностью заряжен, все световые индикаторы загорятся белым цветом и мигают.
- Когда индикаторы зарядки и «детского» режима оба мигают красным, это означает низкий уровень зарядки, в таком случае прибор требуется подзарядить.
- Когда вы отключаете прибор, мигание индикаторов режимов обозначает текущий заряд батареи.

Инструкция по применению

Наклоните прибор и поместите наконечник в рот, направьте наконечник на зуб и включите прибор.

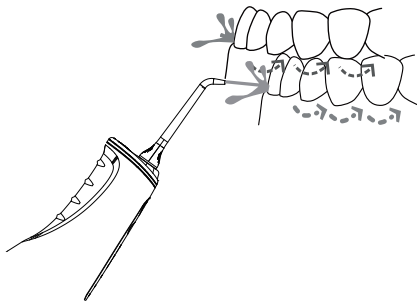


Направляйте водяную струю на десны под углом 90° , прикрывайте губы, чтобы вода не разбрызгивалась. Для лучшего результата начните очистку с моляров (задних зубов) и двигайтесь к передним зубам. Ведите наконечник вдоль десневой линии и продолжайте очистку межзубных пространств, пока не очистите все зубы.

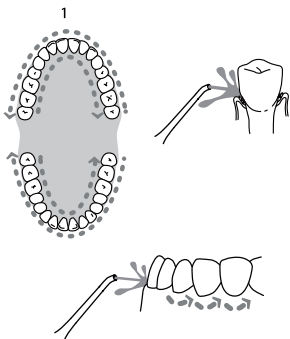

Очистка резервуара для воды

Выключите прибор и откройте заднюю крышку резервуара, держа его отверстием книзу (см.рис. 1), вылейте остатки воды из резервуара, а затем включите прибор, чтобы из наконечника полностью вышла оставшаяся вода, затем выключите прибор.

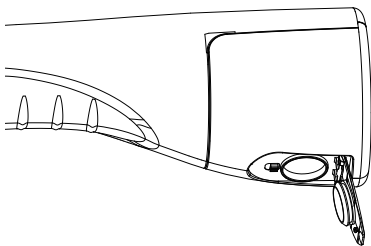


При необходимости снимите и вымойте резервуар.

При снятии прибора пользуйтесь обеим руками, как показано на Рисунках 3-4.

Возьмите прибор за корпус левой рукой, а правой отсоедините от него резервуар.

При необходимости резервуар можно почистить щеткой (Внимание: щетки не входят в комплект поставки).

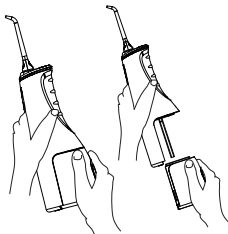

Техническое обслуживание и обращение с батареей.

Техническое обслуживание батареи.

- При первом использовании прибор необходимо заряжать как минимум 6 часов.
- Если вы планируете не использовать прибор долгое время, предварительно полностью зарядите его.
- Для продления срока службы батареи старайтесь подзаряжать ее по мере расхода заряда.

Уход за батареей и ее утилизация

- В приборе установлена литиевая батарея, которую нельзя заменить. Для защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в местный центр по переработке отходов.

Распространенные проблемы и их решения:

Проблемы	Причины	Решения
Вода вытекает в месте соединения наконечника и ирригатора.	Повреждено уплотнительное кольцо в разьеме для наконечника	Обратитесь в центр гарантийного обслуживания
	Наконечник установлен неправильно	Переустановите наконечник правильно
Резервуар протекает	Повреждено уплотнительное кольцо	Замените уплотнительное кольцо, обратитесь в центр гарантийного обслуживания
Недостаточное давление	Наконечник поврежден	Замените наконечник на новый
	Низкое напряжение	Подзарядите прибор
	Низкой уровень заряда батареи	Подзарядите прибор
Вода не выходит из наконечника	Наконечник заблокирован	Пососите наконечник
	Заблокирована трубка для подачи воды	Введите воду через наконечник
		Встряхните наполненный водой прибор
Не горит индикатор заряда	Короткое замыкание	Обратитесь в центр гарантийного обслуживания
	Прибор установлен на зарядную станцию в неправильном положении	Установите прибор на зарядную станцию правильно, чтобы он начал заряжаться
Короткое время работы после полной зарядки	Недостаточное время зарядки	Подзарядите прибор
	Короткое замыкание	Обратитесь в центр гарантийного обслуживания

Если указанные методы не могут решить перечисленные проблемы, проконсультируйтесь с продавцом прибора или обратитесь в центр гарантийного обслуживания за информацией о ремонте по гарантии.

Обратите внимание:

1. При первом использовании рекомендуется выбирать «мягкий» режим, чтобы избежать кровоточивости десен из-за их недостаточной адаптации к массажу водяной струей под высоким давлением.
2. Этот прибор не подходит для использования детьми, младенцами и другими пользователями, если он используется не под присмотром опекунов и без надлежащих инструкций. Держите прибор вдалеке от детей и младенцев. Не играйте с прибором.
3. Пациентам с пародонтитом или перенесшим хирургическую операцию в полости рта в ближайшие два месяца необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед использованием прибора.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПОРТАТИВНОГО ИРРИГАТОРА ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА – ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

В соответствии с применимыми государственными нормативами прибор должны ремонтировать бесплатно в течение одного года после покупки (отсчет от даты на чеке), если его поломка не вызвана действиями людей. Гарантия не распространяется на принадлежности – такие, как наконечник. Если гарантийный период истек, обратитесь в центр гарантийного обслуживания за платным ремонтом.

**Благодарим вас за покупку
портативного ирригатора для полости рта.**

Ирригатор для полости рта дает уникальное сочетание водяной струи под давлением и пульсации, позволяя очистить участки между зубами и под линией десен, удалить вредные бактерии и остатки пищи, что невозможно сделать обычной щеткой и зубной нитью. Ирригатор массирует и стимулирует десны, улучшая кровообращение, благодаря чему десны становятся здоровыми и сильными. Также ирригатор идеально подходит для чистки мостов, брекетов и коронок. Наслаждайтесь домашним СПА для зубов всей семьей!